


F&P 950

F&P 950™ Sensor Cartridge

USER INSTRUCTIONS

REF **950S01**
950S02

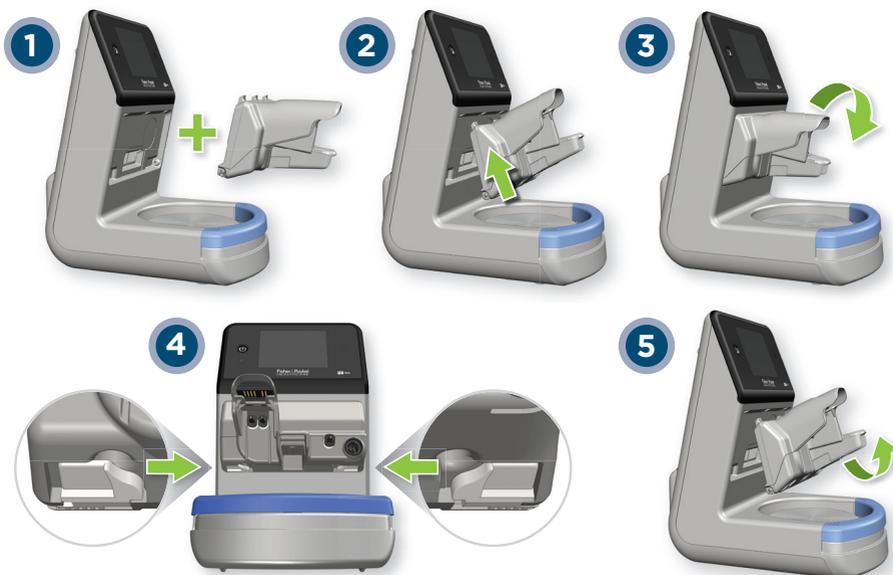

Intended use The F&P 950 Sensor Cartridge is intended for use with the F&P 950 Respiratory Humidifier to measure gas temperature and flow rate.

Set up Insert the top of the Sensor Cartridge into the top of the recess at the front of the humidifier. Once the top clips are in place push the Sensor Cartridge in toward the humidifier until the base of the Sensor Cartridge clicks into place. (See diagram 1, 2 & 3)

NOTE: Update the heaterbase software to Rev J (6.0.10) or later before attaching the 950S02 Sensor Cartridge.

Removal To remove the Sensor Cartridge, disengage clips simultaneously and rotate out of the humidifier. (See diagram 4 & 5)

Cleaning Refer to F&P 950 Respiratory Humidifier User Instructions for cleaning instructions.

NOTES

- Do not immerse or autoclave Sensor Cartridge.
- Do not spray liquid into the vents or onto electrical connectors. Failure to comply may result in irreparable damage to the product.

Maintenance A full technical description, including routine maintenance and service data, is contained in the Product Technical Manual available from your supplier or Fisher & Paykel Healthcare. The Sensor Cartridge should be replaced at or before the end of its service life.

For service life, refer to the technical specifications contained within the Product Technical Manual.

Warnings and notes

⚠ WARNINGS

- The Product Technical Manual must be followed for all servicing and maintenance of the product. Failure to comply may impair performance of this product or compromise safety (including potentially causing serious harm).
- This product is only designed and verified for use with the F&P 950 Respiratory Humidifier. Unauthorised devices or circuits which are used with this product may impair performance of this product or compromise safety (including potentially causing serious patient harm).
- Visually inspect components and accessories for damage before use and replace if damaged. Use of damaged components may impair performance of this product or compromise safety (including potentially causing serious harm).
- Do not touch the electrical connectors and the patient simultaneously. Failure to comply may result in serious harm.
- California residents please be advised of the following, pursuant to Proposition 65: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm. For more information, please visit: www.fphcare.com/prop65

NOTES

If a serious incident has occurred while using this device, please inform your local Fisher & Paykel Healthcare representative and, for European Union member countries, the Competent Authority in your country.

Symbol definitions

	Follow instructions for use - safety		Consult instructions for use. www.fphcare.com/950IFU
	Date of manufacture		Manufacturer
	Temperature limitations		Humidity limitations
	Date of expiration		WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Medical Device		For USA: prescription only
	Importer		Distributor
	Authorized representative for Switzerland		UK responsible person

Refer to F&P Respiratory Humidifier User Instructions for other symbol definitions.

Përdorimi i synuar Kaseta e sensorit F&P 950 është menduar për t'u përdorur me me Lagështuesin e Frymëmarrjes F&P 950 për të matur temperaturën e gazit dhe ritmin e rrjedhjes.

Montimi Fusni pjesën e sipërme të Kasetes së sensorit në pjesën e sipërme të ndërprerjes në pjesën e përparme të lagështuesit. Kur kapëset e sipërme të jenë vendosur siç duhet shtyjeni Kaseten e sensorit në drejtim të lagështuesit derisa baza e Kasetes së sensorit të futet në vend. (Shihni diagramin 1, 2 dhe 3)

SHËNIMI: Përditësoni softuerin e bazës së ngrohjes në versionin Rev J (6.0.10) ose në një version më të fundit përpara se të vendosni Kaseten e sensorit 950S02.

Heqja Për ta hequr Kaseten e sensorit, shkëpusni njëkohësisht kapëset dhe rrotullojeni jashtë lagështuesit. (Shihni diagramin 4 dhe 5)

Pastrimi Referojuni udhëzimeve të përdoruesit të Lagështuesit të frymëmarrjes F&P 950 për udhëzimet e pastrimit.

SHËNIME

- Mos e zhyni apo fusni Kaseten e sensorit në autoklavë.
- Mos spruconi lëng te ventilimi apo lidhësit elektrikë. Moszbatimi i këtij paralajmërimi mund të rezultojë në dëmtim të pariparueshëm të produktit.

Mirëmbajtja Përshkrimi i plotë teknik, përfshirë mirëmbajtja rutinë dhe të dhënat e shërbimit gjendet në Manualin teknik të produktit, të ofruar nga furnitorji juaj ose Fisher & Paykel Healthcare. Kaseta e sensorit duhet të zëvendësohet në momentin e përfundimit të jetëgjatësisë së saj ose para këtij momenti.

Për jetëgjatësinë e shërbimit, referojuni specifikimeve teknike të përfshira në Manualin teknik të produktit.

Paralajmërimet dhe shënime

⚠ PARALAJMËRIME

- Manuali teknik i produktit duhet të ndiqet për të githa shërbimet dhe mirëmbajtjen e produktit. Moszbatimi i paralajmërimeve të mëposhtme mund të dëmtojë performancën e produktit ose të komprometojë sigurinë (përfshi këtu shkaktimin e një dëmtimi të rëndë të mundshëm).
- Ky produkt është krijuar dhe verifikuar vetëm për përdorim me Lagështuesin e frymëmarrjes F&P 950. Pajisjet apo qarqet e paautorizuara që përdoren me këtë produkt mund të dëmtojnë performancën e produktit ose të komprometojnë sigurinë (përfshi këtu shkaktimin e një dëmtimi të rëndë të mundshëm të pacientit).
- Kontrolloni vizualisht pjesët dhe aksesoret për dëme përpara përdorimit dhe zëvendësojini ato nëse janë të dëmtuara. Përdorimi i komponentëve të dëmtuar mund të dëmtojë performancën e këtij produkti ose të komprometojë sigurinë (përfshi këtu shkaktimin e një dëmtimi të rëndë të mundshëm).
- Mos i prekni lidhësit elektrikë dhe pacientin njëkohësisht. Moszbatimi i këtij paralajmërimi mund të rezultojë në dëmtim të rëndë.

SHËNIME

Nëse gjatë përdorimit të kësaj pajisjeje ka ndodhur një incident i rëndë, jeni të lutur të informoni përfaqësuesin tuaj lokal të Fisher & Paykel Healthcare dhe për shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, autoritetin kompetent në vendin tuaj.

Përkufizimet e simboleve

	Ndiqni udhëzimet për përdorim - siguria		Konsultohuni me udhëzimet përpara përdorimit. www.fphcare.com/950IFU
	Data e prodhimit		Prodhuesi
	Kufizimet e temperaturës		Kufizimet e lagështisë
	Data e skadencës		WEEE (Mbetjet e Pajisjeve Elektrike dhe Elektronike)
	Pajisje mjekësore		Për SHBA-në: vetëm me recetë
	Importuesi		Shpërndarësi
	Përfaqësuesi i autorizuar për Zvicrën		Personi përgjegjës për MB

Referojuni udhëzimeve të përdoruesit të lagështuesit të frymëmarrjes F&P për përkufizime të tjera të simboleve.